

SKINDERMA

— MEDICAL COSMETICS —



DeepTrilogy 3.0


DeepTrilogy 3.0

Frecuencia 448<KHz.

Tratamiento de radiofrecuencia con el que se aplica calor en la zona a tratar para incrementar la temperatura interna. **Con esta acción, se favorece la remodelación de los contornos y la reafirmación de la piel.**

Una **tecnología de recuperación celular** que aplica calor (actuando desde el interior) favoreciendo así a un funcionamiento óptimo de las células. Con este tratamiento se **consigue estimular la formación de colágeno** y se favorece la oxigenación del tejido permitiendo que los organismos y tejidos estén saludables y activos y con una activación óptima.

Es un **tratamiento totalmente inocuo y no invasivo**, la sesión produce un efecto relajante y calmante debido al calor aplicado en la zona y al movimiento que se produce mientras se aplica el tratamiento. Una sesión muy placentera que, además, proporciona resultados muy eficaces desde la primera sesión.

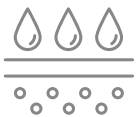

Sinergia con
principios activos



Protocolo 60'



Corporal



Facial



SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —

3 TIPOS DE RADIOFRECUENCIA



Diatermia capacitiva (CET)

Utiliza electrodos que transfieren energía y aumentan la temperatura de los tejidos. Con esto, consigue varios objetivos:
Estimular la síntesis de colágeno.
El aumento controlado de temperatura genera una respuesta en los fibroblastos, las células que producen colágeno.



Diatermia resistiva (RET)

Electrodos sin aislante.
Calentamiento de tejidos NO hidratados: huesos, grasa, tejidos fibrosos, etc. Diatermia difusa: Manipulo con diatermia resistiva para realizar masajes corporales.
Combinando la técnica del masaje corporal junto con la diatermia resistiva logramos activar la circulación, tonificación y relajación de los músculos.



Radiofrecuencia rotativa 360°

Tiene como función mejorar la remodelación facial o corporal.

Especificaciones eléctricas: AC 110V/60Hz/AC220V/50Hz
Potencia emisión CET: 250 W
Potencia emisión RET: 150 W
Frecuencia: 448KHz

Diatermia monopolar

Diámetro aplicadores CET: 20-60-80 mm
Diametro aplicadores RET: 20-60-80 mm

Roll System

Diámetro Esferas 20-50 mm
Rotación: 360° mm
Velocidad de rotación: 5 niveles


RTS

Potencia / Frecuencia: 150 W / 448 KHz

SKINDERMA

— MEDICAL COSMETICS —

DeepTrilogy 3.0

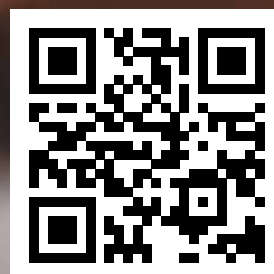

Skinderm Cosmetic S.L.
C/ Peña Manteca, F 15-16
Parque emp. Argame
33163 - Asturias - España
hola@skindermacosmetics.es
@skindermamedicalcosmetics
www.skindermacosmetics.es